

Innowacja dla strefy estetycznej

Stabilne połączenie struktury i łącznika

Zwiększona
powierzchnia retencyjna

Konstrukcja połączenia stykowego

Zapobiega odpryskiwaniu
krawędzi korony

Śrubokręt Torx

Umożliwia wygodne, pewne
przyłożenie momentu obrotowego
w kanale pod kątem

Innowacyjna śruba z podwójnym gwintem

Unikalna konstrukcja
śrub z dwoma różnymi
skokami gwintu,
zapobiega zapadaniu
się łącznika w
implancie, zapobiega
luzowaniu śrub



Opcje katowe dla optymalnej odbudowy

→ 0°/ 11°/ 22°

Brak otworów na śruby
w obszarze estetycznym,
najlepsze kształtowanie
profilu

Biologiczna linia S


Zapewnia lepszy biotyp
wokół implantu i lepszy
profil wyłaniania

Łącznik RC-Base

(Prosty)

- Śruba DP (1-MTO-D2T5) w zestawie
- Używaj z kluczem Torx (MTO-DIT5-FW)
- Różne wysokości przedziastkowe (2/ 3/ 4mm)
- Zalecany moment obrotowy: 15Ncm

Średnica profilu	Kąt	Wysokość filaru (mm)	wysokość przedziastkowa wargowa/językowa (mm)	Nr katalogowy
Ø4.5	0°	4.7	2 (1.1)	D-MA35-C0G2-AS
			3 (1.9)	D-MA35-C0G3-AS
			4 (2.8)	D-MA35-C0G4-AS

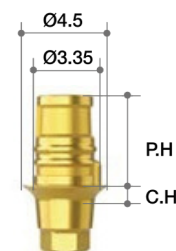

Łącznik RC-Base

(11°)

- Śruba DP (1-MTO-D2T5) w zestawie
- Używaj z kluczem Torx (MTO-DIT5-FW)
- Różne wysokości przedziastkowe (2/ 3/ 4mm)
- Zalecany moment obrotowy: 15Ncm

Średnica profilu	Kąt	Wysokość filaru (mm)	wysokość przedziastkowa wargowa/językowa (mm)	Nr katalogowy
Ø4.5	11°	4.7	2 (1.9/1.1) 3	D-MA35-C1G2-AS
			(2.7/1.9) 4	D-MA35-C1G3-AS
			(3.6/2.7)	D-MA35-C1G4-AS



Łącznik RC-Base

(22°)

- Śruba DP (1-MTO-D2T5) w zestawie
- Używaj z kluczem Torx (MTO-DIT5-FW)
- Różne wysokości przedziastkowe (2/ 3/ 4mm)
- Zalecany moment obrotowy: 15Ncm

Średnica profilu	Kąt	Wysokość filaru (mm)	wysokość przedziastkowa wargowa/językowa (mm)	Nr katalogowy
Ø4.5	22°	4.7	2 (2.8/1.1)	D-MA35-C2G2-AS
			3 (3.5/1.9)	D-MA35-C2G3-AS
			4 (4.4/2.7)	D-MA35-C2G4-AS



Śruba DP

- Śruba z podwójnym gwintem

Torx	Nr katalogowy
T5	MTO-D2T5



Klucz Torx

- Maksymalna siła dokręcania : 35Ncm
- Trox T5

Torx	Długość (mm)	Nr katalogowy
T5	30	MTO-DIT5-FW-BOX



Przenośnik łącznika

- Służy do osadzenia łącznika w implantach w prawidłowej pozycji

Typ	Długość (mm)	Nr katalogowy
M1.8	30	MTO-DT-BOX



Adapter

- Do klucza Torx (MTO-DIT5-FW) do użycia z rączką i ręcznie

Typ	Nr katalogowy
ręczny	TTAI100

