


Inteligentne rozwiązania
podwójna korzyść

Światowej
klasy

AmorRidge

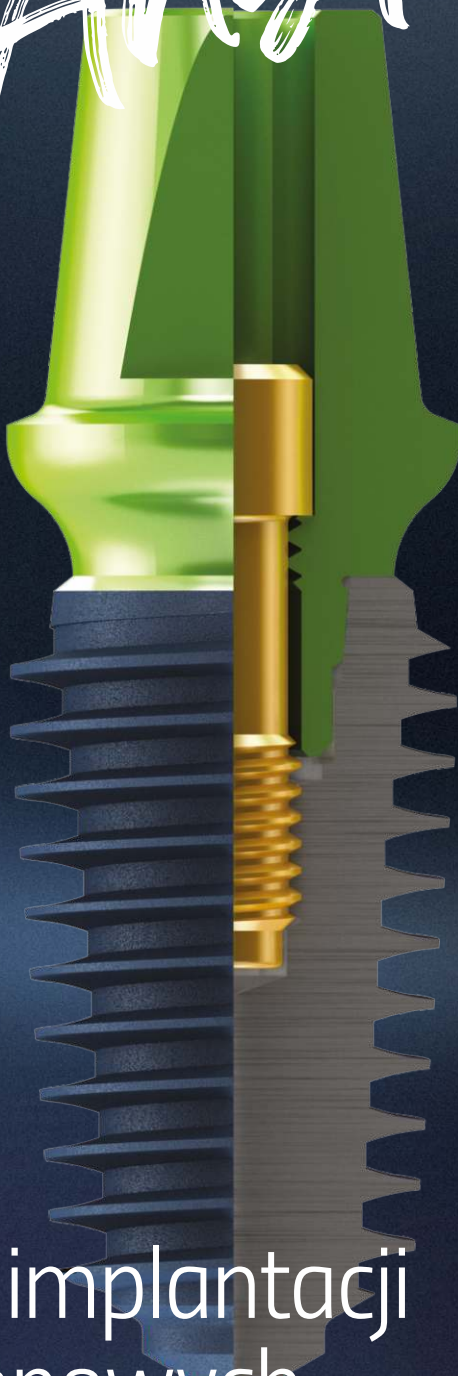

Opcja S2
dla udanej implantacji
zębów trzonowych


1. Wybierz odpowiednią średnicę implantu

Różne głębokości gwintu przy tej samej średnicy rdzenia


Średnica rdzenia	Średnica implantu									
	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	Ø6.0	Ø6.5	Ø7.0	Ø7.5	Ø8.0
Ø2.8		Implanty zalecane w obrębie zębów siecznych								
Głębokość gwintu	0.3									
Ø3.3						Implanty zalecane w obrębie zębów siecznych bocznych i dolnych				
Głębokość gwintu		0.35	0.6	0.85	1.1					
Ø3.8						Implanty zalecane w obrębie zębów, przedtrzonowych i trzonowych w implantacji odroczonej i natychmiastowej				
Głębokość gwintu			0.35	0.6	0.85	0.6	0.85	1.1	1.35	1.6
Ø4.8	Implanty zalecane w obrębie zębów trzonowych i implantacjach natychmiastowych									
Głębokość gwintu					0.35	0.6	0.85	1.1	1.35	1.6

2. Wybierz łącznik Extra EZ Post do odbudowy zębów trzonowych

[Połączenie stożkowe]

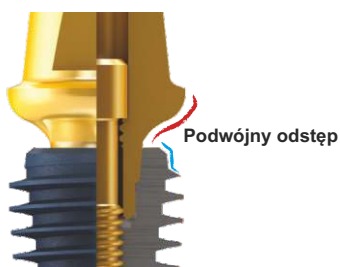


★ [S2 Opcja : Połączenie stożkowe z rozszerzeniem na platformę implantu]

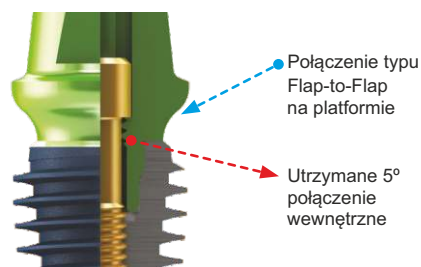

Połączenie stożkowe z rozszerzeniem na platformę implantu ma dwójaką zaletę:


1. Silna odporność na boczne siły okluzyjne.
2. Brak zapadania się protetyki
 - większość połączeń wewnętrznych pokazuje 30~50 µm zapadania się po założeniu korony.
 - opcja S2 zabezpiecza przed zapadaniem zachowując jednocześnie 5° połączenie wewnętrzne.

[S2 Opcja : Połączenie stożkowe z rozszerzeniem na platformę implantu]

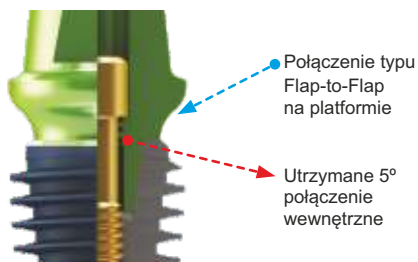

W przypadku wystąpienia deficytu tkanki miękkiej, zaniku kości, wystąpienia sytuacji kiedy platforma implantu znajduje się na poziomie lub powyżej tkanki miękkiej, dla uzyskania maksymalnej estetyki, należy użyć łącznika, który umożliwi wyprowadzenie uzupełnienia protetycznego bezpośrednio z poziomu platformy implantu. Firma Megagen stworzyła w tym celu łącznik Extra EZ Post, który zachowuje cechy połączenia stożkowego z rozszerzeniem bezpośrednio na stopień implantu. Stwarza to możliwość wykonania odbudowy protetycznej bezpośrednio z platformy implantu zachowując maksymalnie zgodną biologicznie szerokość profilu wylania. Szczególnie zalecany do odbudowy zębów trzonowych.


Łącznik Extra EZ Post

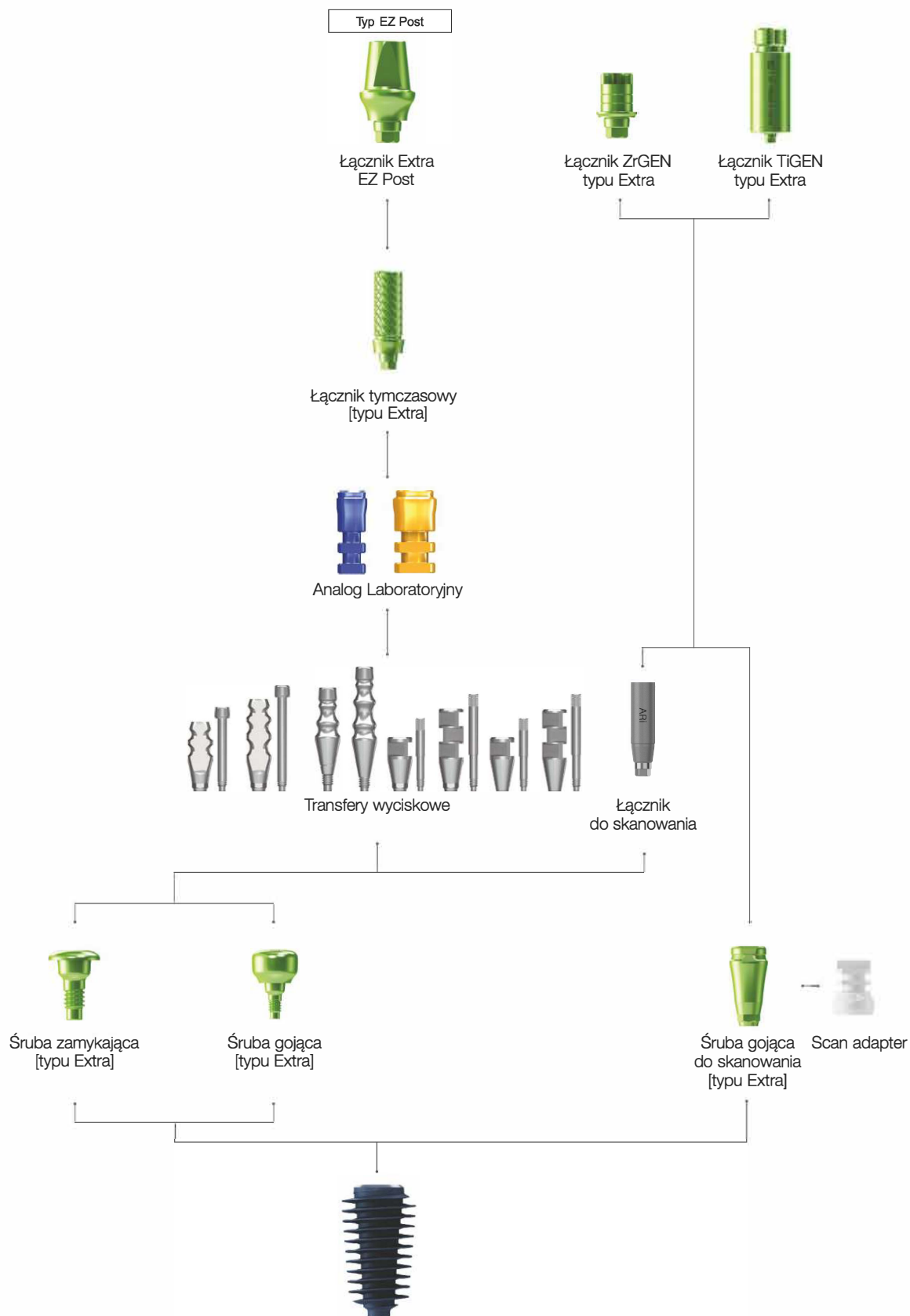

Łącznik Extra EZ Post

Łącznik Extra EZ Post

- Śruba kliniczna i laboratoryjna (AANMSF/AANMST) w zestawie.
- Przydatne, gdy implant zostanie odsłonięty nad linią dziąsła.
- Zalecany moment obrotowy: 35Ncm.

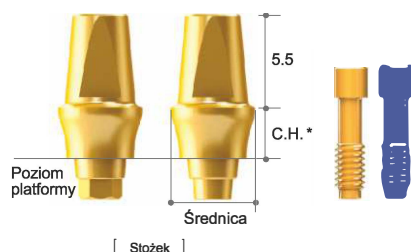

* C.H. = Cuff Height - wysokość przedziąsłowa

Typu EZ Post

Średnica rdzenia	Średnica profilu	Wysokość przedziąsłowa	Typ	Nr katalogowy
Ø3.3	Ø5.0	2	z heksem	ARNEEH5025L
		3		ARNEEH5035L
		4		ARNEEH5045L
		5		ARNEEH5055L
		2	bez hekxa	ARNEEN5025L
	3	ARNEEN5035L		
	4	ARNEEN5045L		
	5	ARNEEN5055L		
	2	z heksem		ARNEEH6025L
	3		ARNEEH6035L	
	4		ARNEEH6045L	
	5		ARNEEH6055L	
	2		bez hekxa	ARNEEN6025L
	3	ARNEEN6035L		
	4	RNEEN6045L		
5	ARNEEN6055L			

Śruba zamykająca (typu Extra)

- Zawarta w opakowaniu implantu.
- Użyj klucza ręcznego (1.2 Heks).
- Używana przy gojeniu zamkniętym.
- Chroni wewnętrzną strukturę implantu.
- Różne wysokości mogą być wybrane w zależności od położenia implantu względem poziomu kości.
- Zalecany moment obrotowy: ręcznie (5 - 8Ncm).

Średnica rdzenia	Średnica profilu	Typ	Nr katalogowy
Ø3.3	Ø4.0	Stożkowy	AANCSF4008



Śruba gojąca (typu Extra)

- Zawarta w opakowaniu implantu
- Użyj klucza ręcznego (1.2 Heks).
- Używana przy gojeniu otwartym lub podczas zabiegów dwuetapowych.
- Wybierz odpowiednią średnicę i wysokość śruby gojącej w zależności od sytuacji.
- Pomaga stworzyć odpowiedni profil wylaniania w okresie gojenia się dziąsła.
- Zalecany moment obrotowy: ręcznie (5 - 8Ncm).


Średnica rdzenia	Średnica profilu	Wysokość (mm)	Typ	Nr katalogowy
Ø3.3	Ø5.0	3	Stożkowy	ARNEHA503
		4		ARNEHA504
		5		ARNEHA505
		6		ARNEHA506
		7		ARNEHA507
	Ø6.0	3		ARNEHA603
		4		ARNEHA604
		5		ARNEHA605
		6		ARNEHA606
		7		ARNEHA607
Ø4.8	Ø6.5	4	Platforma	AANHAF484



Analog laboratoryjny

- Niebieski: łącznik typu stożkowego (EZ Post).
- Żółty: łącznik typu platformy (Extra EZ Post).

Średnica profilu	Kolor	Nr katalogowy
Ø4.0 ~ Ø5.5	Niebieski	AANLAF4055
Ø6.0 ~ Ø8.0	Żółty	AALLAF6080

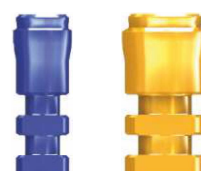

Opcje łącznika ZrGEN Extra

- baza tytanowa

Łącznik ZrGEN Extra

- Śruba łącznika w zestawie
- AnyRidge (AANMSF)
- MiNi (MIAZ1410)

- Baza tytanowa
- 1 zestaw (łącznik - 10 sztuk)
 - w zestawie zapasowa śruba łącznika
 - MiNi ZrGEN ma specjalną śrubę ZrGEN
- Obsługa Dental CAD
 - 3 Shape
 - Exocad
 - Dental Wings
- Liczby nacięć zależy od wysokości filaru
 - Filar = 4,5 liczba nacięć: 2
 - Filar = 5 liczba nacięć: 3
 - Filar = 6 liczba nacięć: 4
 - Filar = 8 liczba nacięć: 6



Extra

System	Rdzeń implantu	Średnica	Wysokość przedz.	Wysokość filaru (mm)	Type	Nr katalogowy
AnyRidge	Rdzeń 3.3	Ø4.5	0.6	4.5	heks	ARZXM4515L
				6		ARZXM4516L
				8		ARZXM4518L
			1.5	4.5		ARZXM4525L
				6		ARZXM4526L
				8		ARZXM4528L
			3.0	4.5	heks	ARZXM4535L
				6		ARZXM4536L
				8		ARZXM4538L
			0.6	4.5	bez heksa	ARZXM4515NL
				6		ARZXM4516NL
				8		ARZXM4518NL
			1.5	4.5		ARZXM4525NL
				6		ARZXM4526NL
				8		ARZXM4528NL
			3.0	4.5		ARZXM4535NL
				6		ARZXM4536NL
				8		ARZXM4538NL
	Rdzeń 3.8	Ø5.0	0.6	4.5	heks	ARZXM503815L
				6		ARZXM503816L
				8		ARZXM503818L
			1.5	4.5		ARZXM503825L
				6		ARZXM503826L
				8		ARZXM503828L
			3.0	4.5		ARZXM503835L
				6		ARZXM503836L
				8		ARZXM503838L
			4.0	4.5		ARZXM503845L
				6		ARZXM503846L
				8		ARZXM503848L
			0.6	4.5	bez heksa	ARZXM503815NL
				6		ARZXM503816NL
				8		ARZXM503818NL
			1.5	4.5		ARZXM503825NL
				6		ARZXM503826NL
				8		ARZXM503828NL
			3.0	4.5		ARZXM503835NL
				6		ARZXM503836NL
				8		ARZXM503838NL
			4.0	4.5		ARZXM503845NL
				6		ARZXM503846NL
				8		ARZXM503848NL
		Ø5.5	0.6	4.5	heks	ARZXM553815L
				6		ARZXM553816L
				8		ARZXM553818L
			1.5	4.5		ARZXM553825L
				6		ARZXM553826L
				8		ARZXM553828L
			3.0	4.5		ARZXM553835L
				6		ARZXM553836L
				8		ARZXM553838L
			4.0	4.5		ARZXM553845L
				6		ARZXM553846L
				8		ARZXM553848L
			0.6	4.5	bez heksa	ARZXM553815NL
				6		ARZXM553816NL
				8		ARZXM553818NL
			1.5	4.5		ARZXM553825NL
				6		ARZXM553826NL
				8		ARZXM553828NL
			3.0	4.5		ARZXM553835NL
				6		ARZXM553836NL
				8		ARZXM553838NL
			4.0	4.5		ARZXM553845NL
				6		ARZXM553846NL
				8		ARZXM553848NL

Opcje łącznika ZrGEN Extra

- baza tytanowa

Extra c.d.

System	Rdzeń implantu	Średnica	Wysokość przedz. (mm)	Wysokość filaru (mm)	Type	Nr katalogowy
AnyRidge	Rdzeń 4.8	Ø5.5	0.6	4.5	heks	ARZXL5515L
				6		ARZXL5516L
				8		ARZXL5518L
			1.5	4.5		ARZXL5525L
				6		ARZXL5526L
				8		ARZXL5528L
			3.0	4.5		ARZXL5535L
				6		ARZXL5536L
				8		ARZXL5538L
			4.0	4.5		ARZXL5545L
				6		ARZXL5546L
				8		ARZXL5548L
			0.6	4.5	bez heksa	ARZXL5515NL
				6		ARZXL5516NL
				8		ARZXL5518NL
			1.5	4.5		ARZXL5525NL
				6		ARZXL5526NL
				8		ARZXL5528NL
			3.0	4.5		ARZXL5535NL
				6		ARZXL5536NL
				8		ARZXL5538NL
			4.0	4.5		ARZXL5545NL
				6		ARZXL5546NL
				8		ARZXL5548NL

Opcje łącznika TiGEN

Extra EZ

Łącznik TiGEN

- Śruba łącznika w zestawie
- AnyRidge (AANMSF)

- Łącznik do frezowania
- 1 zestaw (= łącznik 10 sztuk)
 - w zestawie zapasowa śruba łącznika
- Obsługa DentalCAD
 - 3S
 - Ex
 - De
- Implant Megagen : Bx5
- Zalecany moment obrotowy
 - 35 Ncm: AnyRidge/ BlueDiamond/ AnyOne
 - 30 Ncm: Implanty ST (regularne)
 - 15Ncm: Implant MiNi
- Zatwierdzony przez FDA w 2023 r

System	Kolor	Rdzeń implantu	Średnica	Długość	Typ	Nr katalogowy
AnyRidge	Złoty	3.3 stożkowy	Ø10	20	heks	ARTXN1020L
					bez heksa	ARTXN1020NL
		Ø12	heks		ARTXN1220L	
			bez heksa		ARTXN1220NL	
	Zielony	4.8 platforma	Ø10		heks	ARTXL1020L
					bez heksa	ARTXL1020NL
		Ø12	heks		ARTXL1220L	
			bez heksa		ARTXL1220NL	

