

The Original Technology from **W&H**

# MEG-ENGINE™ III

by MEGA'GEN


## Wsparcie dla stabilizacji implantów

Automatyczna kontrola momentu obrotowego zapewnia wsparcie w bezpiecznym wprowadzaniu implantów.



## Gojenie bez stresu

Użyj funkcji automatycznego gwintowania, aby wkręcać implanty w twardą kość. Funkcja gwintowania zapobiega nadmiernej kompresji kości podczas wprowadzania implantu. Rezultat: brak utraty kości i bezstresowe gojenie implantu.

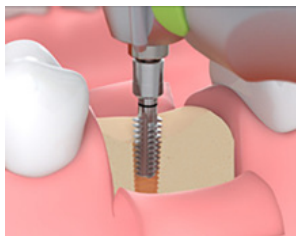

## Mocny silnik elektryczny

Dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu nawet trudne zabiegi implantologiczne nie wymagają użycia dużej siły



## Praca bez zmęczenia

Krótki silnik i ergonomicznie ukształtowana kątówka są idealnie wyważone. Możesz pracować przez długi czas bez zmęczenia lub skurczów dłoni.



# MEG-ENGINE™ III PRO

by MEGA'GEN

## Dane techniczne

| Typ                                             | MEG-ENGINE III                                                                    | MEG-ENGINE III PRO                                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |  |  |
| Napięcie sieciowe                               | 115V, 230V                                                                        | 100V, 115V, 230V                                                                    |
| Częstotliwość                                   | 50-60 Hz                                                                          | 50-60 Hz                                                                            |
| Prędkość przepływu płynu chłodzącego przy 100 % | przynajmniej 90 ml/min                                                            | przynajmniej 90 ml/min                                                              |
| Bezpiecznik sieciowy                            | 250 V – T1,6 AH                                                                   | 250 V – T1,6 AH                                                                     |
| Maksymalny moment obrotowy                      | 70 Ncm                                                                            | 80 Ncm                                                                              |
| Zakres prędkości silnika                        | 300 – 40,000 rpm                                                                  | 200 – 40,000 rpm                                                                    |
| Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość):     | 235mm(W) x 240mm(L) x 100mm(H)                                                    | 262mm(W) x 291mm(L) x 100mm(H)                                                      |
| Waga w kg:                                      | 2.7                                                                               | 3.5                                                                                 |
| Kontrola                                        | Przycisk                                                                          | Ekran bezdotykowy                                                                   |
| Układ optyczny                                  | O                                                                                 | O                                                                                   |
| Protokoły chirurgiczne                          | X                                                                                 | O                                                                                   |
| Tryb przechowywania danych                      | X                                                                                 | O                                                                                   |